

232 mm

<p><b>Distributeur</b> Geeft de instantie aan die het medische hulpmiddel lokaal distribueert. <b>Distributeur</b> Indique l'entité distributrice du dispositif médical dans sa localité. <b>Vertriebspartner</b> Gibt den lokalen Vertreter des Medizinprodukts an.</p> <p><b>Opnieuw verpakt</b> Om aan te geven dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in de oorspronkelijke vorm van de verpakking van het medische hulpmiddel. <b>Reconditionnement</b> Pour indiquer qu'une modification de la configuration d'origine de l'emballage du dispositif médical s'est produite. <b>Umverpackung</b> Gibt an, dass eine Änderung der ursprünglichen Verpackungskonfiguration des Medizinprodukts stattgefunden hat.</p> <p><b>Importeur</b> Geeft de instantie aan die het medische hulpmiddel lokaal importeert. <b>Importateur</b> Indique l'entité importatrice du dispositif médical dans sa localité. <b>Importeur</b> Gibt den lokalen Importeur des Medizinprodukts an.</p> <p><b>Vertaling</b> Om aan te geven dat de oorspronkelijke informatie over het medische hulpmiddel is omgezet in een vertaling die de oorspronkelijke informatie aanvult of vervangt. <b>Traduction</b> Pour identifier que les informations d'origine sur le dispositif médical ont subi une traduction qui complète ou remplace les informations d'origine. <b>Übersetzung</b> Gibt an, dass die ursprüngliche Information über das Medizinprodukt einer Übersetzung unterzogen wurde, die die ursprüngliche Information ergänzt oder ersetzt.</p> <p><b>MD</b> <b>Medisch hulpmiddel. Dispositif médical. Medizinprodukt.</b></p>	<p><b>Website patiëntinformatie. Site Web d'information pour les patients. Website mit Patienten-Informationen.</b></p> <p><b>Land fabricage. Pays de fabrication. Herstellungsland.</b></p> <p><b>Recyclebare verpakking. Emballage recyclable. Recyclbare Verpackung.</b></p>	<p><b>Salvequick MED</b></p> <p><b>WART PLASTER</b>  <b>Wratpenleister</b>  <b>Pansement verrues</b>  <b>Warzenpflaster</b></p> <p>Importer &amp; Distributor contact in Europe:  <b>Orkla Cederroth S.A.U.</b>      Pol. Ind. Can. Bari, Calle D n° 11-12      ES-08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spain.      For distributor in each country, please visit  <b>www.salvequick.com</b></p> <p>Pharmplast S.A.E.      Amria free zone 23512, Alexandria, Egypt.      www.pharmplast-online.com</p> <p>EC REP      E C Rep Ltd.      5 Fitzwilliam Square East,      Dublin 2, D02 R744, Ireland.      Tel: +353 1 2 544 944      Email: info@ecrep.ie</p> <p>985246-02      Revision date: 29/10/2021      0051</p>	
<p><b>NL BESCHERMENDE PLEISTER MET SALICYLZUUR VOOR WRATTEN OP DE VOETZOO.</b></p> <p><b>KENMERKEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salicylzuurschijfjes richten zich op wratten, zonder de omliggende huid aan te tasten.</li> <li>• Helpt wratten zonder pijn te verwijderen.</li> <li>• Snel en effectief.</li> </ul> <p><b>GEbruIKSINSTRUCTIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Week de wrat voor het aanbrengen gedurende 5 minuten in warm water.</li> <li>2. Reinig en droog de huid voor het gebruik, zorg dat het beoogde gebied vrij is van crème en olie.</li> <li>3. Verwijder het beschermstrookje, vermijd daarbij de kleefzijde aan te raken.</li> <li>4. Breng de pleister met het daarin opgenomen salicylzuurschijfje centraal over de wrat aan, zorg dat de randen goed naar beneden zijn gladgestreken.</li> <li>5. Laat deze zitten tot ze begint los te laten.</li> <li>6. Week het aangedane gedeelte gedurende 5 minuten in warm water voordat u losgeraakte huid verwijdert.</li> <li>7. Herhaal deze procedure zo nodig gedurende maximaal 14 dagen.</li> </ol>	<p><b>LET OP!</b></p> <p><b>Niet gebruiken als u diabetisch of overgevoelig voor salicylzuur bent of aan een slechte bloedsomloop lijdt. Zwangere vrouwen en kinderen: alleen gebruiken na goedkeuring door een arts.</b></p> <p><b>Er kan huidschade ontstaan, als de gezonde huid in contact komt met salicylzuur. Beschermende pleister bevat 0,4 g/g (40%) salicylzuur. Gooi de pleister onmiddellijk na gebruik zorgvuldig weg, zonder enig contact met de gezonde huid, om de verspreiding van infecties te voorkomen.</b></p> <p><b>FR PANSEMENT PROTECTEUR À L'ACIDE SALICYLIQUE CONTRE LES VERRUES PLANTAIRES.</b></p> <p><b>PROPRIETES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le pansement à l'acide salicylique cible les verrues sans endommager la peau environnante.</li> <li>• Aide à éliminer les verrues sans douleur.</li> <li>• Rapide et efficace.</li> </ul> <p><b>MODE D'EMPLOI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faire tremper la verrue dans l'eau tiède pendant 5 minutes avant application.</li> <li>2. S'assurer que la peau soit sèche et propre avant utilisation et que la zone ciblée soit exempte de crème ou d'huile.</li> <li>3. Retirer la pellicule antiadhésive en évitant de toucher le côté adhésif.</li> <li>4. Appliquer le pansement en le positionnant au centre de la verrue et en s'assurant que les bords soient bien lissés.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Laisser le pansement en place jusqu'à ce qu'il commence à se décoller. Retirer le pansement après 48 h.</li> <li>6. Faire tremper la zone ciblée dans de l'eau tiède pendant 5 minutes avant de retirer la peau morte.</li> <li>7. Répéter l'opération pendant 14 jours si nécessaire.</li> </ol> <p><b>AVERTISSEMENT</b></p> <p><b>Ne pas utiliser si vous êtes diabétique et/ou en cas d'allergie à l'acide salicylique et/ou en cas de troubles de la circulation sanguine.</b></p> <p><b>L'usage chez la femme enceinte ou chez l'enfant doit être approuvé par un médecin.</b></p> <p><b>La peau saine sera abîmée si elle entre en contact avec l'acide salicylique. Pansement protecteur qui contient 0,4g/g (40%) d'acide salicylique contre les verrues plantaires.</b></p> <p><b>Jeter le pansement immédiatement après use, en évitant le contact avec la peau saine, pour limiter le risque de propagation.</b></p> <p><b>DE SCHUTZPFLASTER MIT SALICYLSÄURE GEGEN FUSSWARZEN.</b></p> <p><b>MERKMALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salicylsäure-Scheiben wirken auf die Warzen ein, ohne die umgebende Haut zu beeinträchtigen.</li> <li>• Hilft, Warzen schmerzfrei zu entfernen.</li> <li>• Schnell und effektiv.</li> </ul>	<p><b>GEbruIKSANWEISUNGEN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weichen Sie die Warze vor der Anwendung 5 Minuten lang in warmem Wasser ein.</li> <li>2. Reinigen und trocknen Sie die Haut vor der Anwendung, und stellen Sie sicher, dass der Zielbereich frei von Cremes und Ölen ist.</li> <li>3. Entfernen Sie die Trennschicht und vermeiden Sie dabei, die Klebseite zu berühren.</li> <li>4. Tragen Sie das Pflaster mit der eingebetteten Salicylsäure-Scheibe mittig über der Warze auf, wobei darauf zu achten ist, dass die Ränder gut geglättet werden.</li> <li>5. An Ort und Stelle belassen, bis es sich zu lösen beginnt. Nach maximal 48 Stunden das Pflaster entfernen.</li> <li>6. Die betroffene Stelle 5 Minuten lang in warmem Wasser einweichen, bevor die gelockerte Haut entfernt wird.</li> <li>7. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf bis zu 14 Tage lang.</li> </ol> <p><b>ACHTUNG!</b></p> <p><b>Nicht anwenden, wenn Sie Diabetiker oder überempfindlich gegen Salicylsäure sind oder unter schlechter Durchblutung leiden.</b></p> <p><b>Schwangere Frauen und Kinder: Nur mit ärztlicher Genehmigung anwenden.</b></p> <p><b>Der Kontakt gesunder Haut mit Salicylsäure führt zu Hautschädigungen.</b></p> <p><b>Schutzpflaster enthält 0,4 g/g (40%) Salicylsäure. Entsorgen Sie das Pflaster sofort nach Gebrauch und vermeiden Sie den Kontakt mit gesunder Haut, um Infektionen zu vermeiden.</b></p>

89 mm

89 mm



**Artwork Code:**

**Repro Version:** STAGE: 3 VERSION: 1

**Job No:** 6389100

**Cutter Ref:**

**Job Title:** ORKLA CARE AB, Salvequickmed 51030023  
SalvequickMed Wart plaster  
kallit

**Design Ref:** DF 616233

**Printer:**

**Contact:**

**Supplier:** ORKLA CARE AB

**Contact:** Tina Aunio-Larsson

**SGS Contact:** Sophie Thompson

**Operator:** GK

**Modify Date:** 17-NOV-21 22:18:32

**Design Barcode:**

**MySGS Barcode:** NONE

**Magnification:**

**BWR:** 880

**Print Process:** Ufo

**Profile:** EC07 99005M ECI Offset ISO Coated 39L

**Substrate:**

Varnish

Line

100%

**Total Ink Coverage:** 106.04%

**Supplier/Printer Sign Off:**  
Please sign and date against your appropriate title after checking proof and indicate clearly any comment or corrections.

**Supplier:**

**Date:**

**Comments:**

**Printer:**

**Date:**

**Comments:**


**INTERNAL USE ONLY APPROVED FOR DESPATCH**

**Content:**  Signed:

**Colour:**  Signed:

**Retoucher Check:**  Signed:

**Date:**

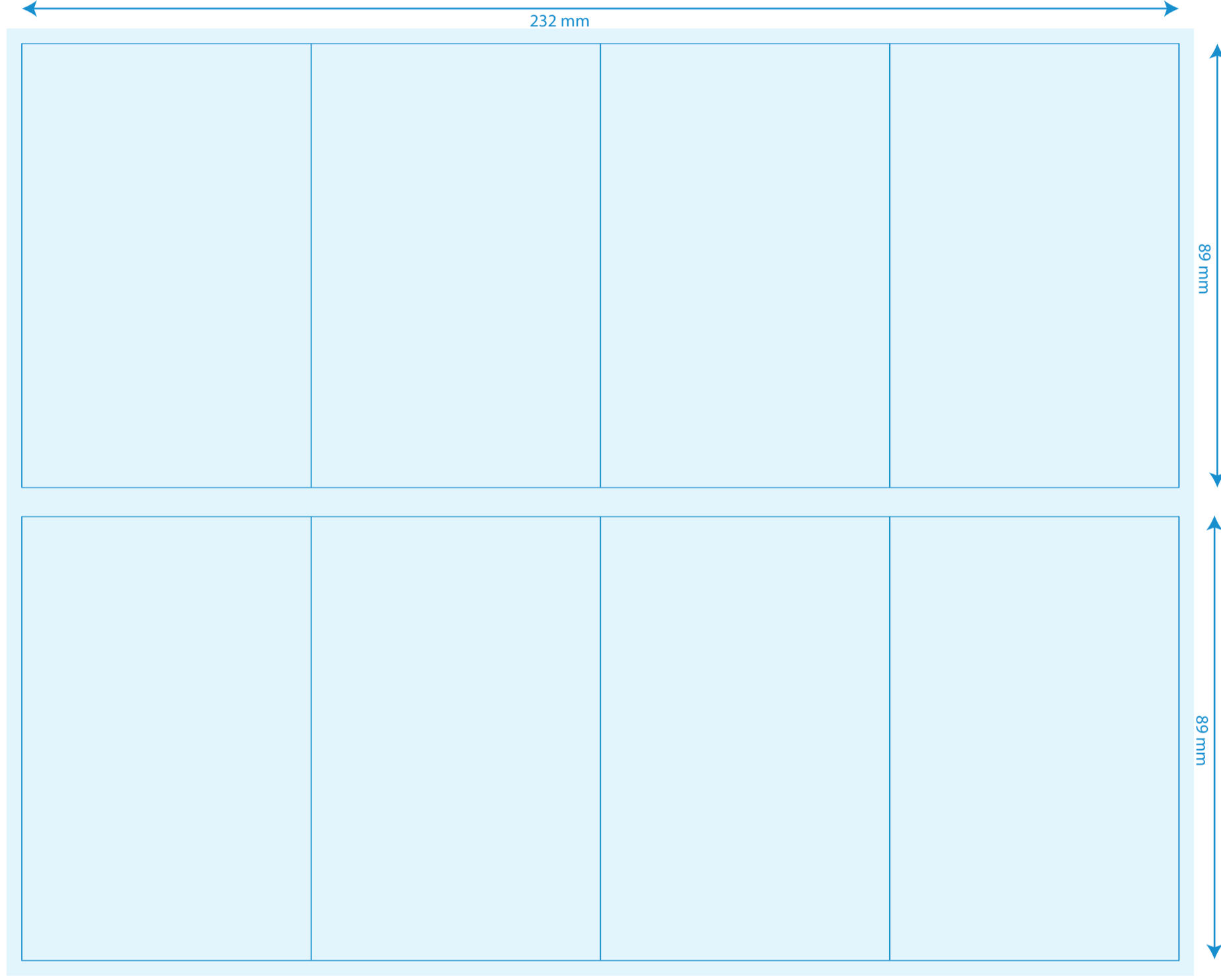

**Notes :**

